

ORFIT® COLORS NS GAUNTLET IMMOBILIZATION ORTHOSIS

Material: Orfit® Colors NS 2.0 mm (1/12”) micro perforation

Indications: acute wrist arthritis, wrist sprain, radial styloiditis, carpal tunnel syndrome

Indicaties: Onsteking van polsgewrichten, polsverstuiking, fractuur van handbeentjes, styloïditis, carpaal tunnel syndroom, reuma (functie-orthese)


Indications: Arthrite radio-cubito-carpienne, entorse du poignet, styloïde radiale, syndrome du canal carpien

Indikationen: Akute Handgelenk-Arthritis, Handgelenk-Verstauchung, Styloiditis Radii, Carpaltunnel Syndrom

Colour	ART. NO.		
	Small	Medium	Large
Ocean Blue	35830B/NS	35831B/NS	35832B/NS
Atomic Blue	35830MB/NS	35831MB/NS	35832MB/NS
Sonic Silver	35830MG/NS	35831MG/NS	35832MG/NS
Dominant Black	35830Z/NS	35831Z/NS	35832Z/NS

<p>This product is made of a Low Temperature Thermoplastic material and can be moulded directly on the patient. Before starting, read the instructions for use (ref. No. 31052) of the basic product mentioned above and take all the necessary precautionary measures.</p> <p>This pattern is NOT SUITABLE for the following applications:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acute fractures of wrist - reflex sympathetic dystrophy (RSD) - prolonged and aggressive use <p>These instructions were made up in accordance with the European Directive 93/42/EEC for Medical Devices. It is prohibited to make alterations to this text without prior approval from Orfit Industries.</p> <p>For additional copies, please contact your local distributor or send an e-mail to welcome@orfit.com</p>	<p>Dit product is vervaardigd uit een lage temperatuur thermoplastisch materiaal dat direct op de patiënt kan worden gevormd. Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzingen (ref. nr. 31052) van het hierboven aangeduide basisproduct en neem de voorzorgsmaatregelen in acht die daarbij horen.</p> <p>Dit patroon is NIET GESCHIKT voor volgende toepassingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acute polsfracturen - Südeck dystrofie - langdurig en agressief gebruik <p>Deze gebruiksaanwijzingen werden opgesteld in de geest van de Europese Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. Het is verboden veranderingen aan te brengen in deze tekst zonder voorafgaande toestemming van Orfit Industries.</p> <p>Indien u bijkomende exemplaren wenst, neem dan contact op met de verdeler in uw land stuur dan een e-mailbericht naar welcome@orfit.com</p>
<p>Ce produit est fabriqué dans un matériel thermoformable à basse température, qui est formé directement sur le patient. Lisez d'abord attentivement les instructions d'utilisation (réf. no. 31052) pour le produit de base mentionné ci-dessus et respectez les précautions d'usage y référant.</p> <p>Ce patron n'est PAS INDIQUE pour les cas suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fractures aiguës du poignet - algo neuro dystrophie - emploi agressif et prolongé <p>Ces instructions d'utilisation ont été rédigées dans l'esprit de la Directive Européenne 93/42/CEE concernant les aides techniques médicales. Il est interdit d'apporter des modifications à ce texte sauf accord préalable d'Orfit Industries.</p> <p>Si vous souhaitez des exemplaires supplémentaires, prenez contact avec notre distributeur dans votre pays ou envoyez votre demande par e-mail à welcome@orfit.com</p>	<p>Dieses Produkt ist aus ein Niedrigtemperatur Thermoplast hergestellt und darf unmittelbar auf den Patienten angelegt werden. Lesen Sie zuerst andächtig die Gebrauchsanweisungen (Ref. Nr. 31052) die zu dem o.e. Basisprodukt gehören und nehmen Sie die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen.</p> <p>Dieses Dessin EIGNET SICH NICHT für die nachstehenden Indikationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - akute Handgelenkfrakturen - Südecksche Dystrophie - langfristigen und aggressiven Gebrauch <p>Diese Gebrauchsanweisungen wurden im Geiste der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG für medische Hilfemittel aufgestellt. Es ist verboten den Text zu ändern, ohne vorhergehende Zustimmung von Orfit Industries.</p> <p>Falls Sie mehrere Exemplare wünschen, bitte nehmen Sie Kontakt auf mit dem Verteiler in Ihrem Land, oder schicken Sie uns einen E-Mail Bericht nach der Adresse welcome@orfit.com</p>

SIZING

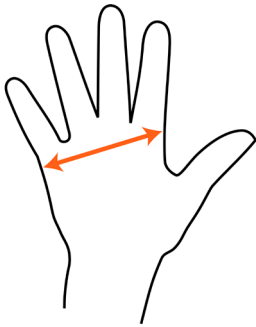

SIZING


Measure the total hand width at the MCP joints of the 2nd to 5th finger.

60-70 mm - 2¹/₅" - 2³/₄" = **SMALL**

80-90 mm - 3¹/₈" - 3¹/₂" = **MEDIUM**

100-110 mm - 4" - 4³/₁₀" = **LARGE**

METHOD OF APPLICATION

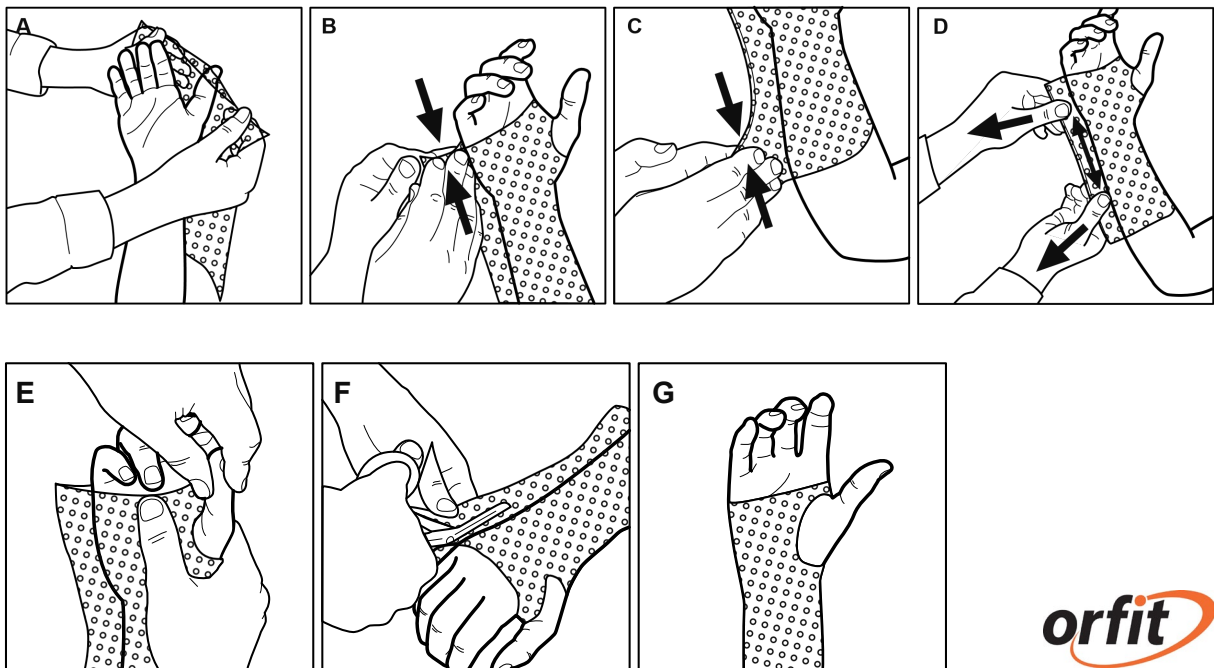

Note:

It is prohibited to make alterations to this text without prior approval from Orfit Industries.
ORFIT® COLORS NS is a registered trademark of ORFIT INDUSTRIES N.V.



ORFIT INDUSTRIES
Vosveld 9A | B-2110 Wijnegem | Belgium
T (+32) (0)3 326 20 26
welcome@orfit.com

www.orfit.com



Ref. No. 35830-35831-35832 ORFIT COLORS NS
VERSION 2
LAST UPDATE: 11/05/2021
REVISION DATE: 11/05/2023